

MECHANICAL FINDER 更新プログラム使用方法


MECHANICAL FINDER の更新プログラムは、新バージョンリリース後に発見されたプログラムのバグ対応や機能向上のための修正を弊社 Web サイトの MECHANICAL FINDER 製品ページ (<http://www.rccm.co.jp/product/medical/mechanical-finder/revision.html>) 上にアップロードを行っているものです。



更新プログラムは、リビジョン番号で管理されており、容易に更新処理が行えるようになっています。下記手順により最新状態にさせていただくよう、よろしくお願い致します。


【 手順 】

1. MECHANICAL FINDER の全ての画面を閉じます。開かれていると更新が失敗することがありますのでご注意ください。
2. 管理者権限でログインし、ご購入エディションの更新プログラムの圧縮ファイルをダウンロードし、解凍します。

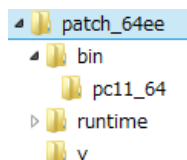


上図のように階層構造で解凍されている事をご確認ください。(フォルダ名は更新プログラムによって異なります)

3. 下図のように、解凍フォルダ内の「mf_patch.exe」を右クリックし、管理者として実行します。

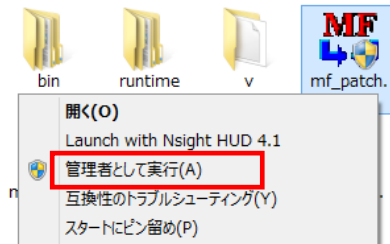

4. 下図のウィンドウが表示されます。

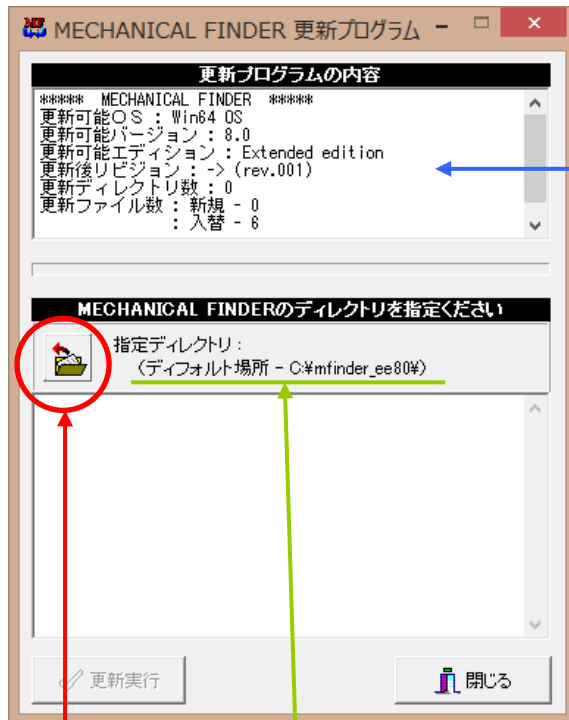

インストール済みの製品と


- ・ OS タイプ
- ・ バージョン
- ・ エディション

が同じであることを御確認ください。

異なっていると更新処理は行なうことができないようになっています。


赤丸個所のボタンを押して、コンピュータ内の MECHANICAL FINDER のインストールディレクトリを指定します。

5. ディレクトリの指定は、以下のようにコンピュータ内の MECHANICAL FINDER のディレクトリを指定します。(ディフォルトインストールの場所がここに表示されますので、参考にしてください)そして、OK ボタンを押します。

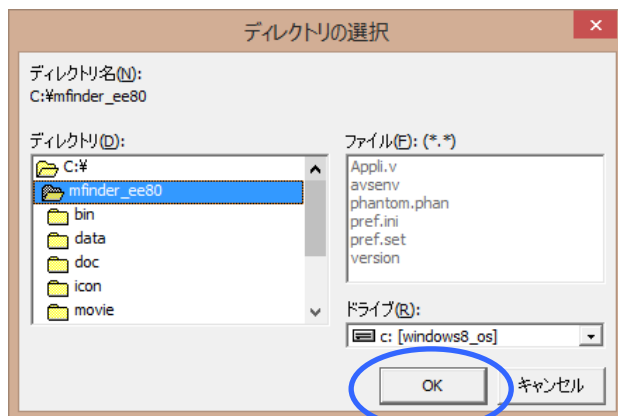


6. 更新可能な状態であれば、下図のような情報が表示され、「更新実行」ボタンを押す事のできる状態になります。

『更新実行』ボタンを押して、MECHANICAL FINDER を更新します。

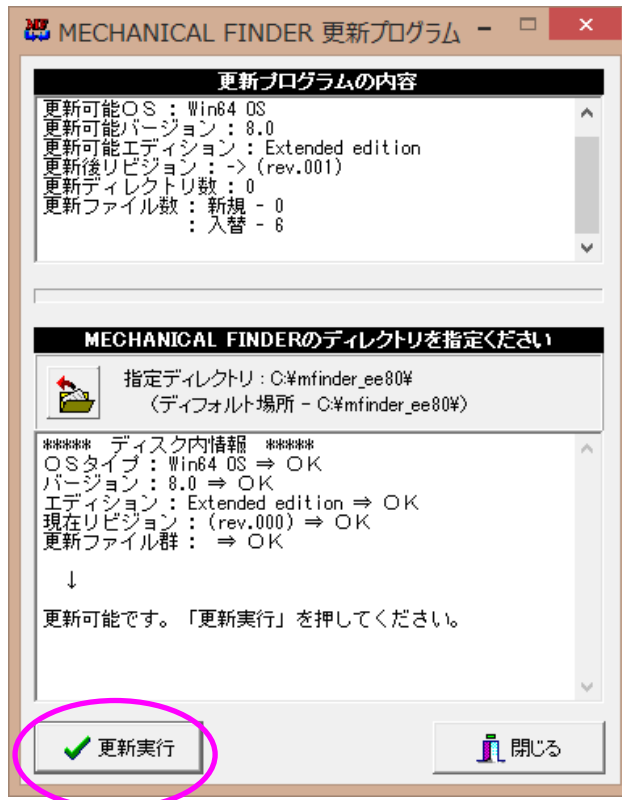

7. 下図のような更新結果が表示されます。最後に「更新に成功しました」というメッセージが表示されていれば更新完了です。「閉じる」ボタンでプログラムを終了します。

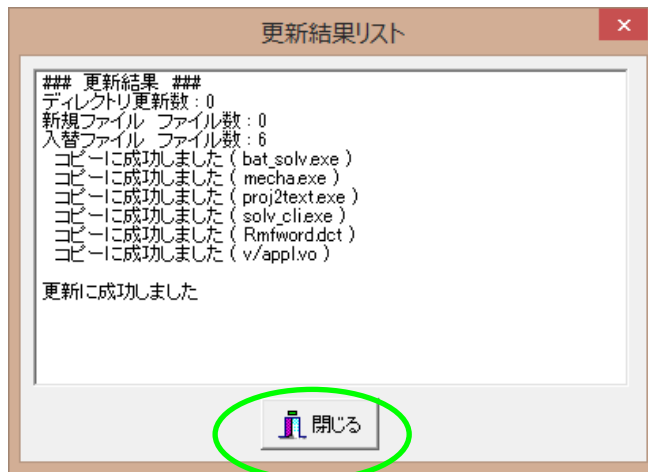

7. 更新作業の終了です。